

myRogerMic 1.0

Uživatelská příručka



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Začínáme

myRogerMic je aplikace vyvinutá společností Sonova – světovou jedničkou v oboru poslechových řešení, se sídlem ve švýcarském Curychu. Prostudujte si pečlivě tyto pokyny, abyste plně využili všechny funkce, které aplikace nabízí.

Určené použití

Určené použití aplikace myRogerMic je výběr, úprava nastavení a ukládání existujících funkcí zařízení Roger On™ a dále přístup k informacím o stavu, a to bezdrátově s možností vizualizace.



Informace o kompatibilitě:

Pro použití aplikace myRogerMic je vyžadováno zařízení Phonak Roger On™ nebo Phonak Roger On™ iN.

Aplikaci myRogerMic lze použít na telefonech s funkcí Bluetooth® Low-Energy (LE) a je kompatibilní se zařízeními se systémem iOS 13 nebo novějším.

Aplikaci lze používat v zařízeních Android™ certifikovanými pro službu Google Mobile Services (GMS), které podporují Bluetooth® 4.2 a Android™ OS 7.0 a jejich novější verze.

Slovní ochranná známka Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek je v rámci licence společnosti Sonova AG.

iPhone® je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a jiných zemích.


Android™ je ochranná známka společnosti Google LLC.

IOS je registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. a jejich poboček v USA a některých dalších zemích, kde společnost Cisco Inc. působí.

Obsah


Začínáme	2
Stručný přehled	3
Instalace aplikace myRogerMic	4
Párování se zařízením Roger On	5
Řešení problémů s párováním	6
Řešení problémů s připojením se zařízením Roger On	7
Funkce režimu mikrofonu*	8
Řízení směru přenosu	9
Vytvoření vlastního režimu	10
Technologie MultiBeam 2.0	11
Přidání, výběr a odebrání zařízení Roger On	12
Síť MultiTalker	13
Další funkce	14
Důležité bezpečnostní informace, vysvětlení symbolů	15

Stručný přehled

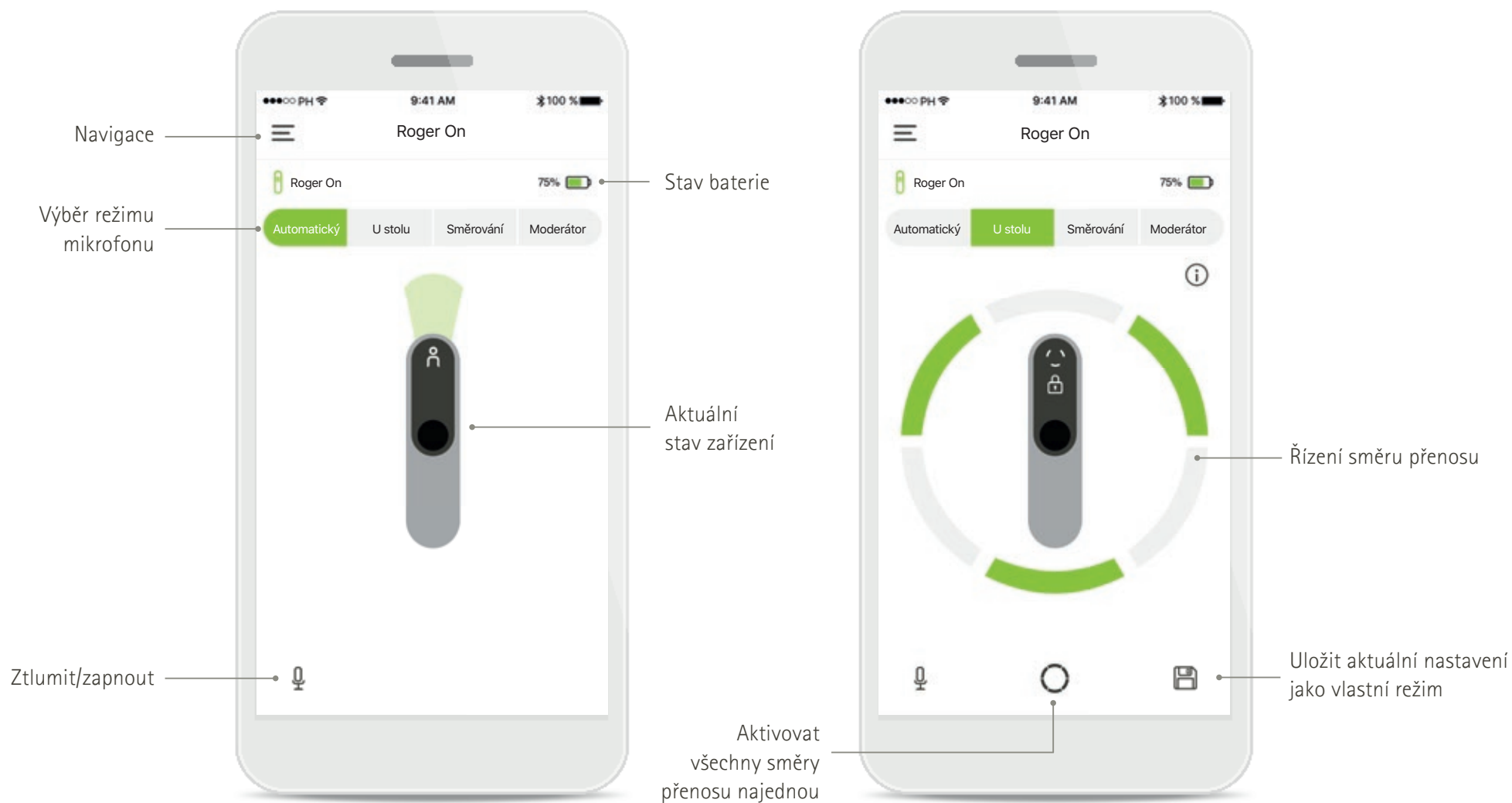


Instalace aplikace myRogerMic


- Připojte váš chytrý telefon k internetu prostřednictvím Wi-Fi nebo mobilních dat.
- Na svém chytrém telefonu zapněte Bluetooth®.

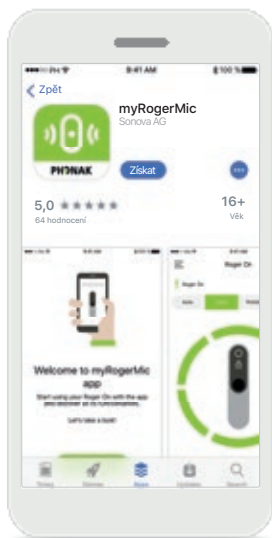


Stáhněte si aplikaci myRogerMic
Stáhněte si aplikaci z internetového obchodu. Po instalaci otevřete aplikaci myRogerMic.

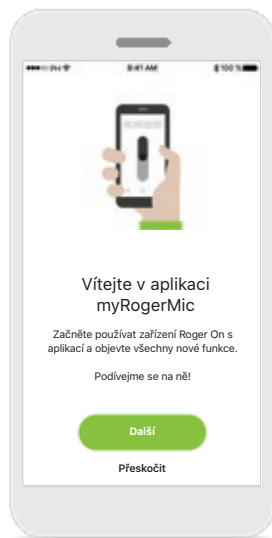

Otevřete aplikaci myRogerMic
Otevřete aplikaci a klepněte na možnost **Další** nebo **Přeskočit** úvodní informace.

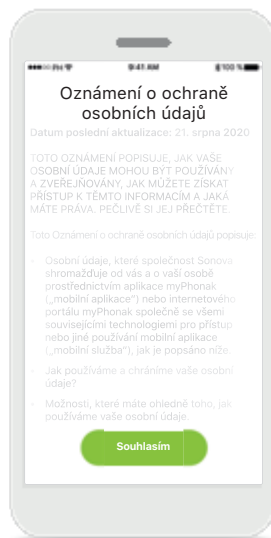

Oznámení o ochraně osobních údajů
Aby bylo možné používat aplikaci, musíte klepnout na možnost **Souhlasím** a přijmout tak podmínky Oznámení o ochraně osobních údajů pro pokračování.

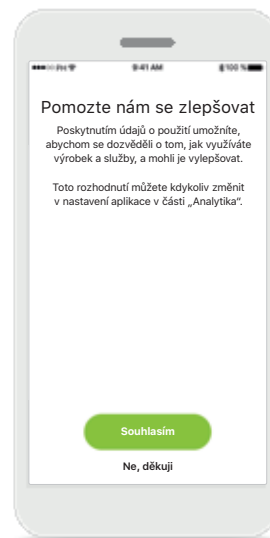

Vylepšování produktu
Sdílením údajů o používání nám můžete pomoci zlepšovat naše výrobky.
Klepněte na možnost **Souhlasím**, pokud chcete sdílet anonymizované údaje o používání, nebo **Ne, děkuji**, pokud raději nechcete.


Párování se zařízením Roger On

Pro připojení zařízení Roger On k aplikaci myRogerMic postupujte podle níže uvedených pokynů. S aplikací můžete spárovat až deset zařízení Roger On. Chcete-li se dozvědět, jak přidat další zařízení, přejděte k části Přidat, vyberte a odeberte zařízení Roger On.




Pokyny k párování

Postupujte podle pokynů na obrazovce a klepněte na možnost **Pokračovat**.

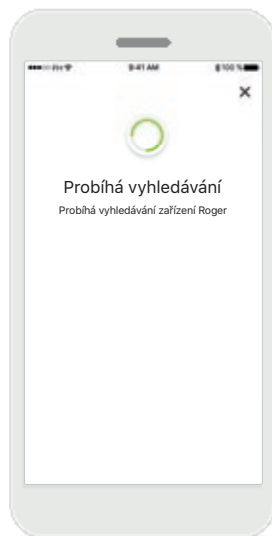


Probíhá vyhledávání

Aplikace vyhledává zařízení Roger On a zobrazí je ihned po jejich detekci. Může to trvat několik sekund.

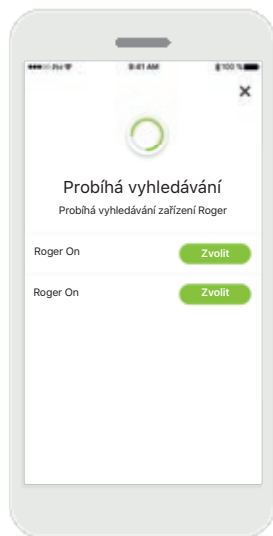


Zvolit

Když se zařízení Roger On zobrazí v seznamu, klepněte na možnost **Vybrat**. Nelze spárovat více zařízení Roger On současně. Každé zařízení Roger On musí být spárováno samostatně.

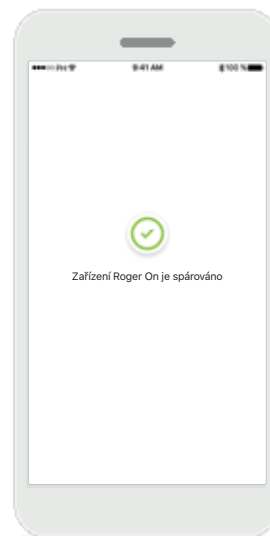

Párování dokončeno

Zařízení Roger On je nyní spárováno. Aplikace přejde automaticky k dalšímu kroku.

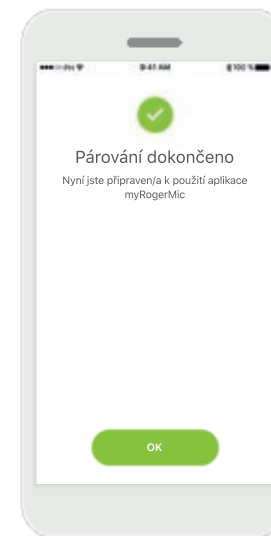


Nastavení dokončeno

Nyní jste připraven/a používat všechny funkce aplikace myRogerMic. Klepnutím na **Ok** přejdete na hlavní obrazovku.


Řešení problémů s párováním

Možné chyby během postupu nastavení.

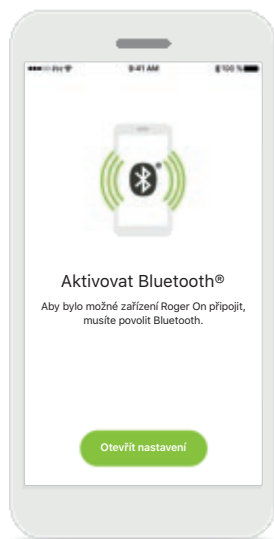


Bluetooth – iOS

Pro spárování zařízení Roger On musí být aktivována funkce Bluetooth vašeho mobilního zařízení. Máte-li iPhone, můžete to provést klepnutím na tlačítko **Otevřít nastavení**.

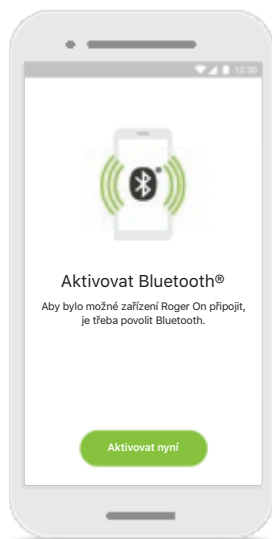


Bluetooth – Android

Pro spárování zařízení Roger On musí být aktivována funkce Bluetooth vašeho mobilního zařízení. Máte-li zařízení Android, funkci aktivujete pouhým klepnutím na tlačítko **Aktivovat nyní**.

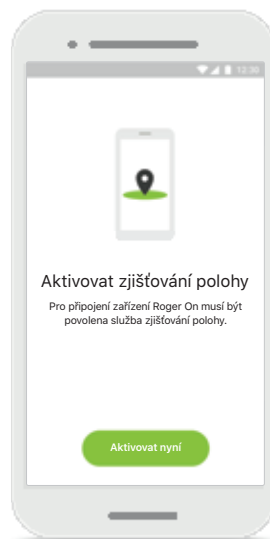

Poloha

U zařízení s OS Android musíte při prvním párování zařízení s funkcí Bluetooth povolit službu zjišťování polohy. Po úvodním nastavení lze službu zjišťování polohy znovu zakázat.

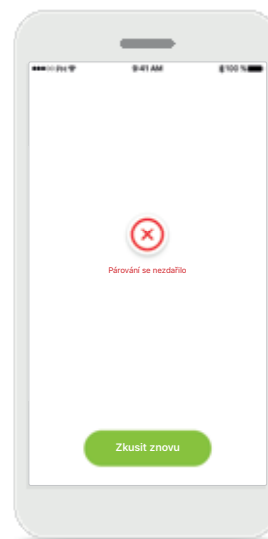


Párování se nezdaří

Pokud se párování nezdaří, můžete:

1. Klepnout na možnost **Zkusit znovu** a restartovat postup párování.
2. Zavřít aplikaci a začít znovu od začátku.

Řešení problémů s připojením se zařízením Roger On

Možné chyby při připojování vašeho zařízení Roger On.

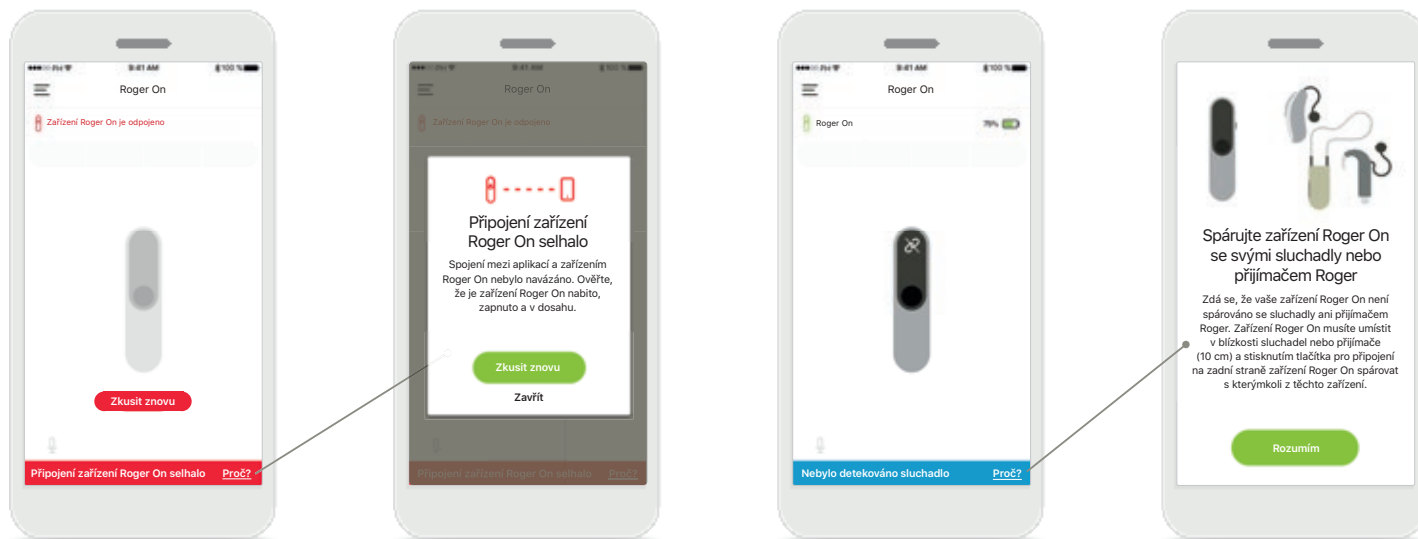

Připojení se nezdaří

Pokud se aplikace myRogerMic nepřipojí k vašemu zařízení Roger On, zkuste se připojit znovu po provedení kontroly, kdy:

- zařízení Roger On je zapnuté a baterie není ve stavu nízké úrovně nabití nebo vybitá,
- zařízení Roger On je v dosahu vašeho mobilního zařízení s Bluetooth.


Připojení se nezdaří – pokyny

Klepnutím na tlačítko **Proč** zjistíte, proč se připojení nezdařilo, a najdete pokyny, jak postupovat při navazování připojení.

Nebylo detekováno sluchadlo


Zařízení Roger On nebylo spárováno s vašimi sluchadly. Klepnutím na tlačítko **Proč** najdete pokyny, jak spárovat zařízení Roger On se sluchadly nebo přijímačem Roger.

Funkce režimu mikrofonu*

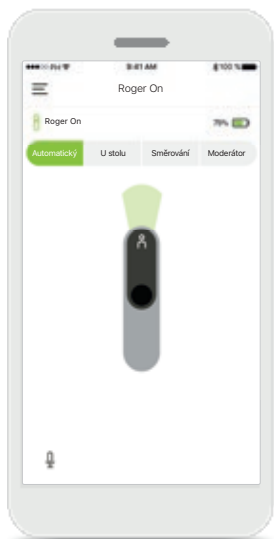


Automatický režim

Když je zařízení Roger On v automatickém režimu, upraví režim svého mikrofonu podle toho, jak je zařízení Roger On umístěno. Režim mikrofonu je zobrazen na obrazovce zařízení Roger On.

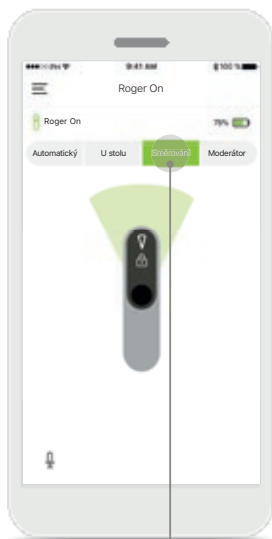

Režim zamčeného mikrofonu

Klepněte na režim mikrofonu, který chcete použít. Vaše zařízení Roger On je nyní uzamčeno ve zvoleném režimu mikrofonu.

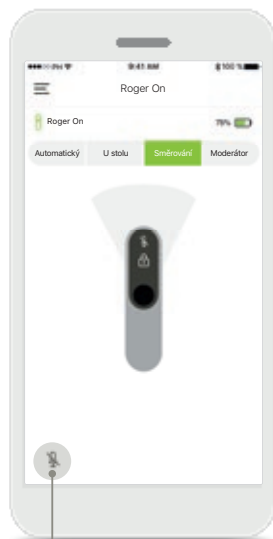



Ztlumit/zapnout

Zařízení Roger On můžete ztlumit a zapnout stisknutím ikony mikrofonu.

*Další informace o různých funkcích režimu mikrofonu najdete v uživatelské příručce zařízení Roger On.

Řízení směru přenosu

Když je zařízení Roger On položeno na stole, použití technologie MultiBeam může zlepšit srozumitelnost řeči v hlučných situacích.¹ Například ve skupinové konverzaci v restauraci nemusí být mluvčí, kterého slyšíte, ten, který vás zajímá. K tomu může dojít, pokud dojde k zahájení vedlejší konverzace u stejného stolu. V tomto případě vám aplikace myRogerMic umožňuje nastavit přenos ve směru mluvčího, který vás zajímá.

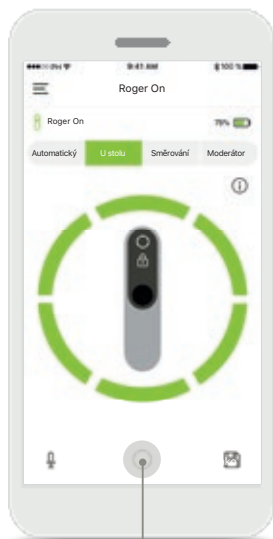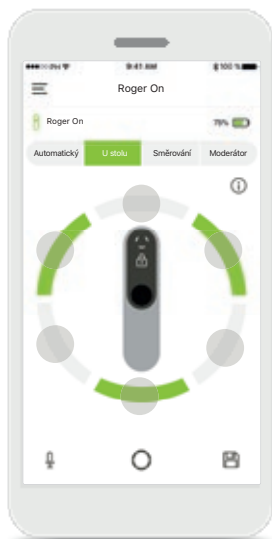

Režim U stolu

Zařízení Roger On umístěte do středu stolu. Pro lepší efekt položte zařízení Roger On na stůl tak, aby byl nabíjecí port umístěn směrem k vám nebo aby zaujímal stejnou polohu, jaká je znázorněná v aplikaci.

Aktivovat/deaktivovat směry přenosu

Klepnutím na segment tento segment aktivujete/deaktivujete.


Aktivovat všech šest směrů přenosu najednou

Všech šest směrů přenosu můžete aktivovat klepnutím na ikonu kruhu na obrazovce.

¹ Thibodeau, L. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. *J Am Acad Audiol*. 31(6):404-411. doi: 10.3766/jaaa.19060.


Vytvoření vlastního režimu

Pokud často používáte konkrétní vzorec směru přenosu, můžete jej uložit jako vlastní režim prostřednictvím aplikace. Poté můžete k tomuto vzorci směru přenosu přistupovat přímo na zařízení Roger On nebo jediným klepnutím v aplikaci. Můžete uložit až dva vlastní režimy, kdykoliv na ně můžete přejít a odstranit je.

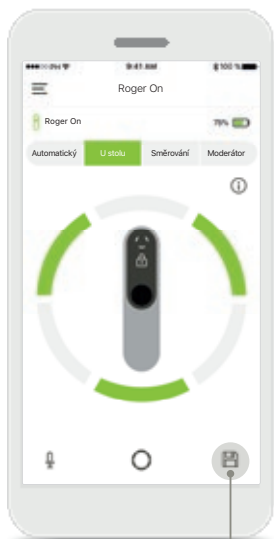


Uložit vlastní režim

Poté, co vyberete často používaný vzorec směru přenosu, klepnutím na ikonu uložení jej uložíte jako vlastní režim. Můžete uložit až dva vlastní režimy.

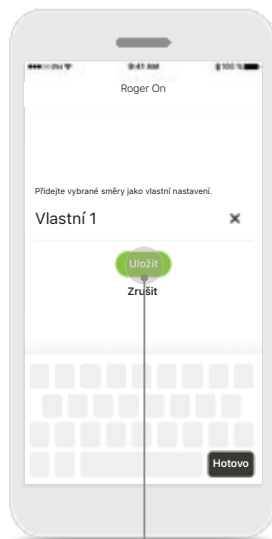


Pojmenovat vlastní režim

Svému směru přenosu můžete dát název a poté klepnete na možnost **Uložit**.

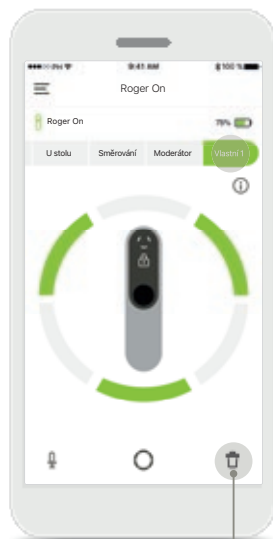

Přístup a odstranění vlastního režimu

Uložený vlastní režim se v seznamu režimů mikrofonu zobrazí jako manuální. Vlastní režim můžete odstranit klepnutím na ikonu odstranění.

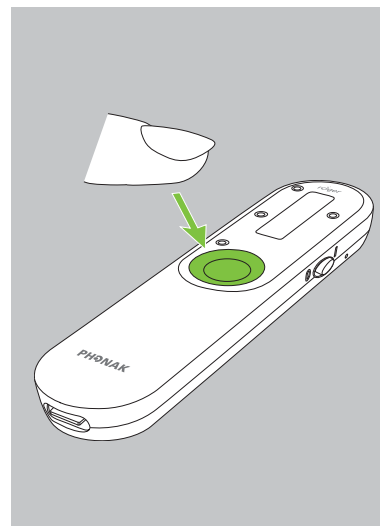


Přístup k vlastnímu režimu pomocí zařízení Roger On


Můžete také aktivovat vlastní režim na zařízení Roger On. Opakovaně stisknete tlačítko Roger On, dokud není vlastní režim povolen.

Technologie MultiBeam 2.0


Pokud nosíte na obou uších sluchadla/kochleární implantáty vybavené technologií RogerDirect vyrobených společností Sonova, můžete MultiBeam 2.0 povolit. Když položíte zařízení Roger On do středu stolu, technologie MultiBeam 2.0 vám umožní slyšet, ze kterého směru někdo mluví. Tuto funkci můžete použít pouze v uzamčeném režimu U stolu.

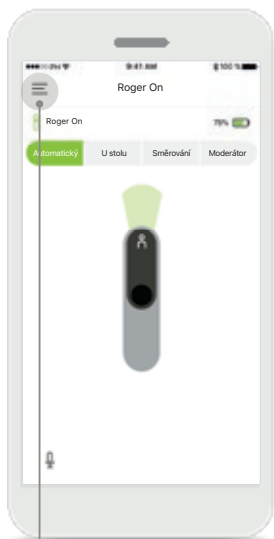


Přejít k nabídce
Klepnutím na ikonu se třemi pruhy přejdete k nabídce.

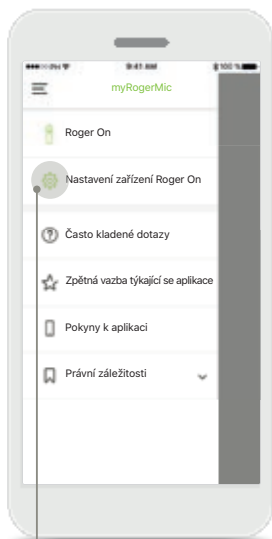


Přejít k nastavení
Klepněte na nastavení zařízení Roger On.

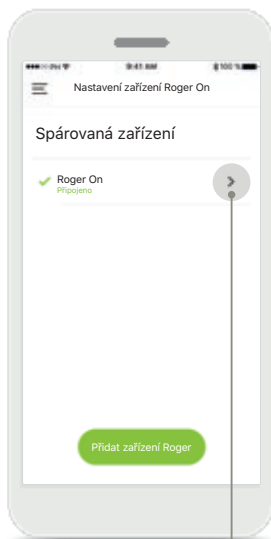

Vybrat zařízení Roger On
Klepnutím na šipku vedle příslušného zařízení Roger On.

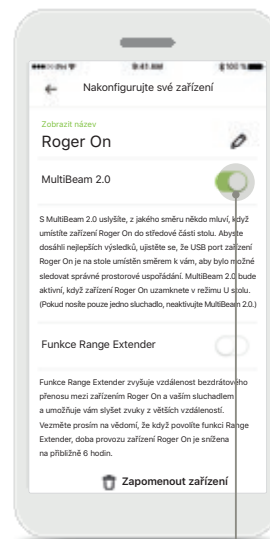


Povolení MultiBeam 2.0
Klepnutím na posuvník MultiBeam 2.0 funkci povolíte. Nastavení je nyní uloženo a vaše zařízení Roger On nyní povolí MultiBeam 2.0 při každém manuálním přepnutí do režimu U stolu.

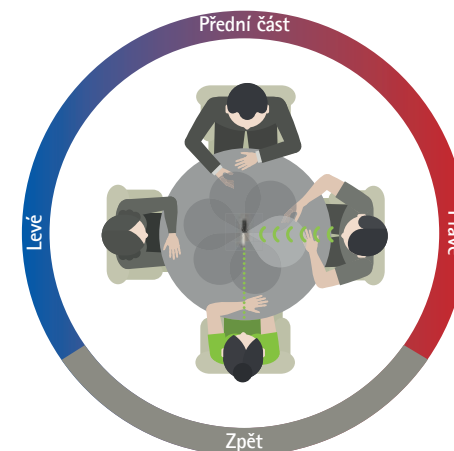

Použití na stole
Zařízení Roger On položte do středu stolu a ujistěte se, že je nabíjecí port umístěn směrem k vám. Poté zařízení Roger On uzamkněte v režimu U stolu pomocí aplikace nebo stisknutím funkčního tlačítka.

Přidání, výběr a odebrání zařízení Roger On

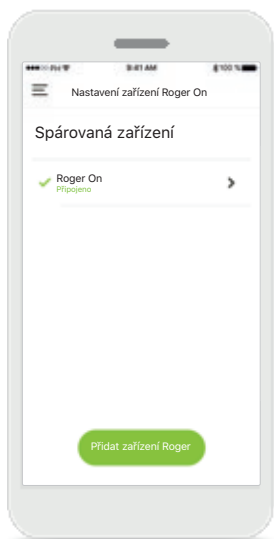


Přidat nové zařízení Roger On

V hlavní navigaci aplikace přejděte na stránku nastavení zařízení Roger On a klepněte na tlačítko **Přidat zařízení Roger**.




Vybrat mezi různými zařízeními

Po dokončení procesu párování se zobrazí pokyny, jak vybrat zařízení Roger On, které chcete použít.

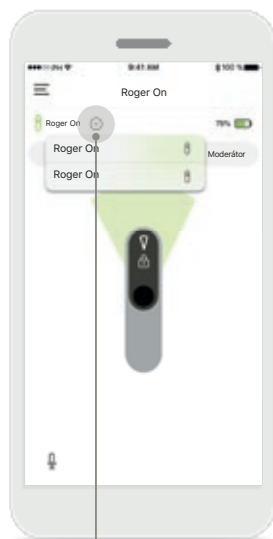


Vybrat mezi různými zařízeními

Pokud je s aplikací spárováno více než jedno zařízení Roger On, na domovské obrazovce se zobrazí šipka. Klepnutím na šipku vyberte zařízení, které chcete pomocí aplikace ovládat.

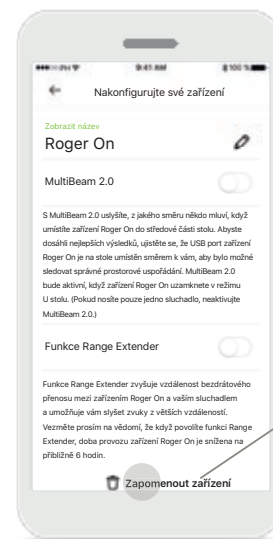

Odebrat zařízení Roger On

V nastavení zařízení Roger v hlavní navigaci aplikace vyberte zařízení Roger On, které chcete odebrat. Klepněte na ikonu Zapomenout zařízení v dolní části stránky.

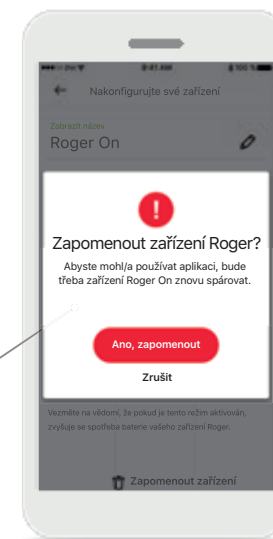

Potvrdit odebrání zařízení Roger On


Klepnutím na tlačítko **Ano, zapomenout** potvrdíte, že chcete odebrat toto zařízení Roger On.

Síť MultiTalker

Váš mikrofon Roger On lze kombinovat s jinými mikrofony Roger, např. Roger Table Mic II, který vám umožní slyšet větší skupinu nebo více vzdálených mluvčích. Zjistěte, jak k mikrofonu Roger On připojit další mikrofon, v kapitole 13 uživatelské příručky zařízení Roger On.

Pokud je zařízení Roger On používáno s jinými mikrofony v síti MultiTalker, automaticky přejde do režimu Moderátor (1). Když položíte zařízení Roger On na stůl nebo jej držíte v ruce, automaticky se ztlumí. Aplikace automaticky zobrazí ztlumený mikrofon a poskytne pokyny, jak znovu zapnout zvuk (2).

Pokud zapnete zařízení Roger On (dlouhým stiskem funkčního tlačítka ve střední části mikrofonu), ostatní mikrofony, které jsou k němu připojeny (tj. jsou ve stejné síti MultiTalker), se automaticky zablokují. Tento stav se rovněž zobrazí v aplikaci myRogerMic (3).

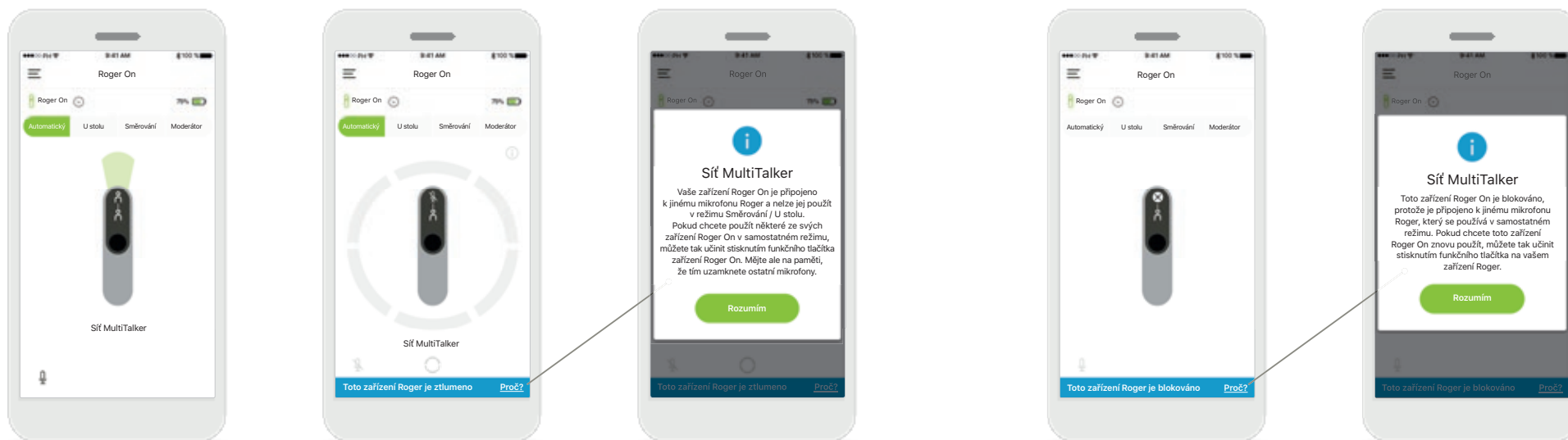

1. Síť MultiTalker

Když je vaše zařízení Roger On připojeno k jinému mikrofonu Roger, aplikace zobrazí automaticky režim Moderátor.


2. Ztlumené zařízení Roger On

Váš mikrofon je ztlumený, protože jej nepoužíváte v režimu Moderátor. Chcete-li zjistit, proč a jak jej můžete znovu zapnout, klepněte na tlačítko **Proč**.

3. Zablokované zařízení Roger On


Váš mikrofon je zablokovaný, protože jiný mikrofon připojený k vašemu mikrofonu je používán v samostatném režimu (Směrování nebo U stolu, když je v síti MultiTalker a je ztlumený). Chcete-li zjistit jak jej můžete odblokovat, klepněte na tlačítko **Proč**.

Další funkce

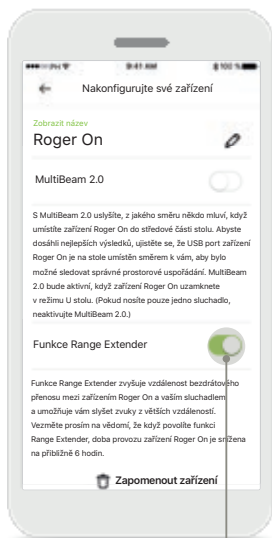


Funkce Range Extender

Funkci Range Extender můžete aktivovat v nastavení zařízení Roger On v hlavní navigaci aplikace. Tato funkce umožňuje poslech ještě vzdálenějších zvuků, protože zvětšuje bezdrátovou přenosovou vzdálenost mezi zařízením Roger On a sluchadly.

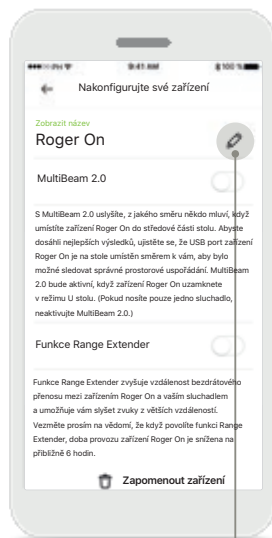

Pojmenovat zařízení Roger On

Vyberte zařízení Roger On, kterého chcete pojmenovat, a název upravte klepnutím na ikonu úprav (tužka).

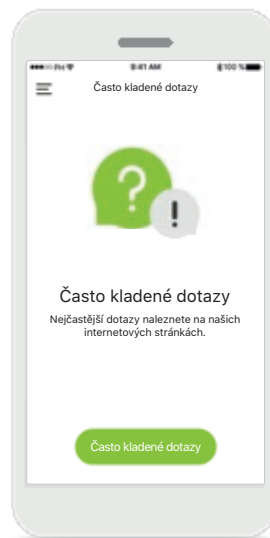

Často kladené dotazy

Na této stránce můžete přejít k často kladeným dotazům na našich externích internetových stránkách.

Důležité bezpečnostní informace



Za používání vlastního chytrého telefonu nesete osobní odpovědnost. Chytrý telefon a aplikaci používejte s opatrností.



Změna režimu mikrofону nebo použití funkce řízení směru přenosu může snížit slyšitelnost výstražných nebo bezpečnostních signálů. Mohlo by dojít k rizikovým situacím.



Pokud zařízení Roger On nereaguje na zařízení kvůli rušení neobvyklým polem, z rušivého pole odejděte.



Pokud zařízení Roger On nereaguje, zkontrolujte, zda je zařízení Roger On zapnuté, baterie není vybitá nebo zda se zařízení nachází v dosahu standardního připojení Bluetooth LE.



Chcete-li získat tištěnou kopii s návodem k použití, kontaktujte místního zástupce společnosti Sonova. Kopie vám bude zaslána do 7 dnů.



Aktivujte funkci Bluetooth. Aby bylo možné zařízení Roger On připojit, je třeba povolit Bluetooth.



Neaktivujte funkci MultiBeam 2.0, pokud používáte pouze jedno sluchadlo. Může dojít ke snížení poslechového výkonu vašeho sluchadla.

Vysvětlení použitých symbolů



Tento symbol znamená, že je důležité, aby si uživatel přečetl relevantní informace uvedené v této uživatelské příručce a řídil se jimi.



Tento symbol znamená, že je důležité, aby se uživatel řídil relevantními upozorněními uvedenými v této uživatelské příručce.



Důležité informace týkající se manipulace s výrobkem a jeho bezpečnosti.



Symbolem CE společnost Sonova AG potvrzuje, že tento výrobek značky Phonak splňuje požadavky směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU. Certifikace CE udělena v roce 2020.

Distributor pro Českou republiku:

REJA spol. s r. o.

www.reja.cz

www.phonak.cz

www.sluchadla-deti.cz

www.komunikacnisystem.cz

www.audiodum.cz



Sonova AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa, Švýcarsko

www.phonak.com



Sonova Deutschland GmbH

Max-Eyth-Straße 20

70736 Fellbach-Oeffingen, Německo