

myPhonak Junior 1.3

Uživatelská příručka



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Začínáme

myPhonak Junior je aplikace vyvinutá společností Sonova, světovou jedničkou v oboru poslechových řešení se sídlem ve švýcarském Curychu. Prostudujte si pečlivě tyto pokyny, abyste plně využili všechny funkce, které aplikace nabízí.

Tato uživatelská příručka popisuje funkce aplikace myPhonak Junior a způsob ovládání těchto funkcí uživatelem. Popisuje také, jak blokovat určité funkce pro děti rodičovským zámekem tak, aby je bylo možno používat pouze pod dohledem rodiče. Než začnete aplikaci používat, přečtete si tuto uživatelskou příručku.

Kognitivní vývoj je u každého dítěte jiný, a to i u dětí stejného věku. Úroveň vyzrálosti a uvědomění si rizik je třeba u každého dítěte vyhodnotit individuálně, aby bylo možné posoudit, zda je vhodné používat aplikaci myPhonak Junior.

Další informace jsou uvedeny v kapitole "Důležité informace o bezpečnosti" na straně 16. Jako náповědu lze použít následující doporučení:

- Aplikaci k provádění úprav zařízení nesmí používat děti mladší 6 let.
- Aplikaci nepoužívejte k provádění úprav ani pro dítě, pokud vám není schopno poskytnout spolehlivou zpětnou vazbu o výhodách provedených úprav.
- Výzkumy prokázaly, že aplikaci jsou schopny bez dozoru správně používat děti od věku 10 let. Pokud se domníváte, že je dítě zralé k používání aplikace bez dozoru, ověřte si, zda dokáže činit informovaná rozhodnutí o tom, jak nastavení přes aplikaci ovlivní jeho sluch a vnímání zvuků kolem sebe.
- Schopnost číst a porozumět varovnému upozornění je nezbytná.



Informace o kompatibilitě:

Pro použití aplikace myPhonak Junior je nezbytná konektivita sluchadel Phonak s Bluetooth®.

Aplikace myPhonak Junior je určena k použití se sluchátky se schopností nízkoenergetické (LE) komunikace přes Bluetooth® a je kompatibilní s telefony využívajícími operační systém iOS® verze 14.0 nebo novější. Aplikace myPhonak Junior je použitelná i v telefonech Android™ certifikovaných službou Google Mobile Services (GMS) a podporujících verzi Bluetooth® 4.2 a Android OS 8.0 a novější.

Slovní ochranná známka Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek je v rámci licence společnosti Sonova AG.

iPhone® je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a jiných zemích.


Android je ochranná známka společnosti Google LLC.

iOS® je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. a/nebo jejich přidružených společností ve Spojených státech amerických a některých dalších zemích.

Obsah

Stručný přehled	4
Instalace aplikace myPhonak Junior	6
Párování s kompatibilními sluchadly	7
Rodičovská kontrola	9
Osobní nastavení	10
Řešení problémů s párováním	11
Dálkové ovládání	12
Relace Vzdálené podpory	13
Moje sluchadla	15
Důležité bezpečnostní informace	16
Vysvětlivky k použitým symbolům	20


Stručný přehled – Dálkové ovládání

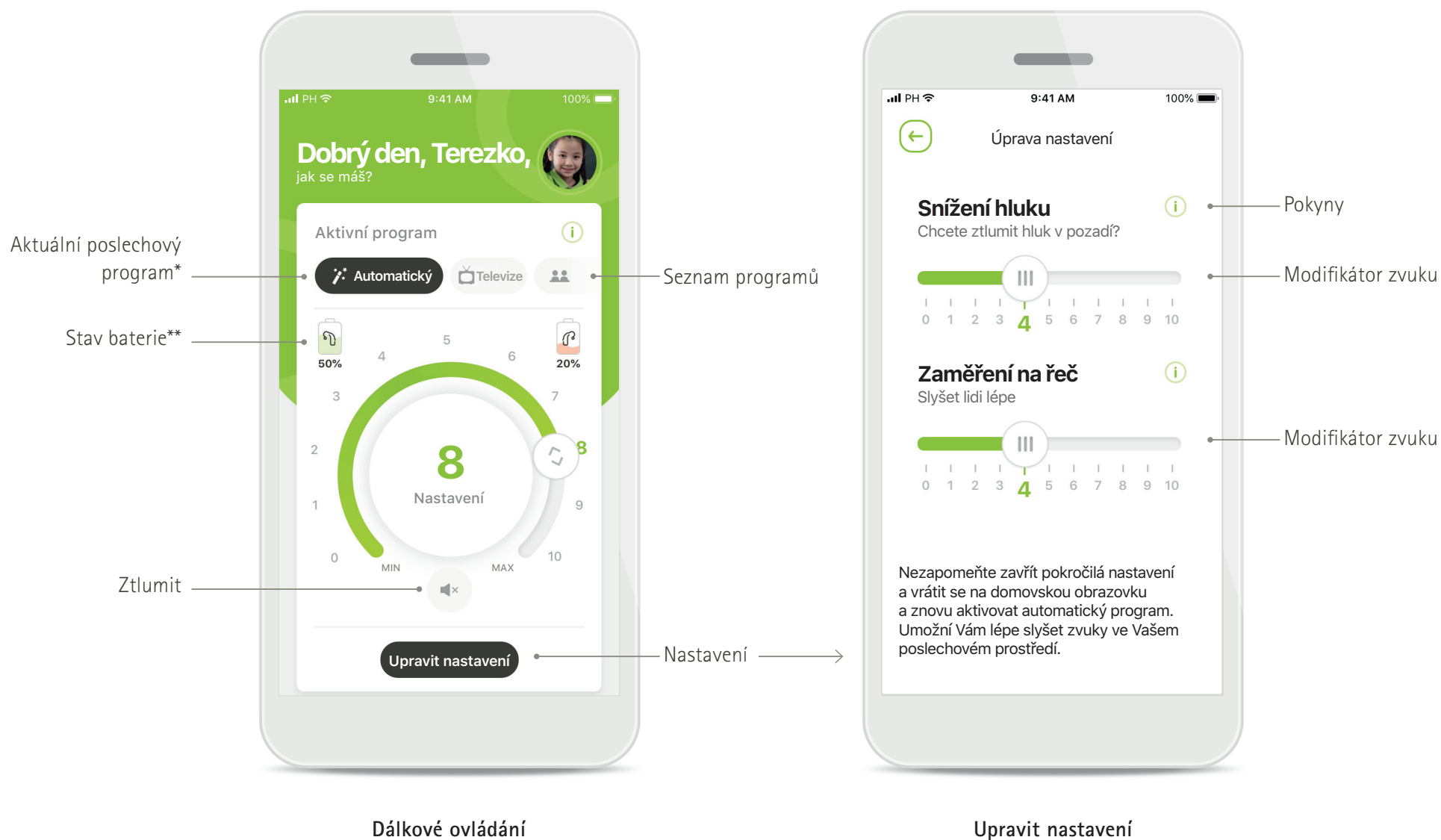


*AutoSense™ Sky OS pro sluchadla Sky. AutoSense™ OS pro sluchadla Bolero, Naída a Audéo.

**Dostupné pouze pro dobíjecí sluchadla.

Stručný přehled – Vzdálená podpora*

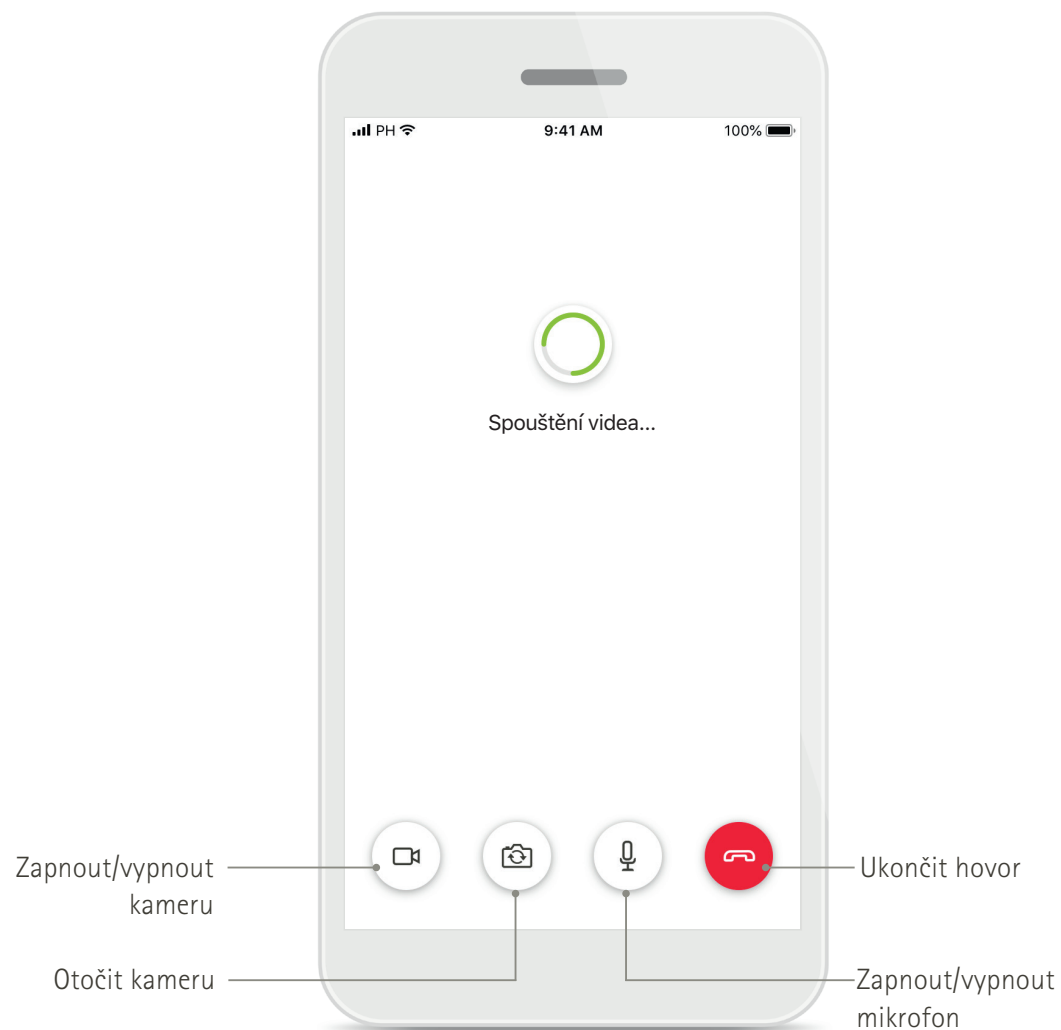

Hovor přes Vzdálenou podporu

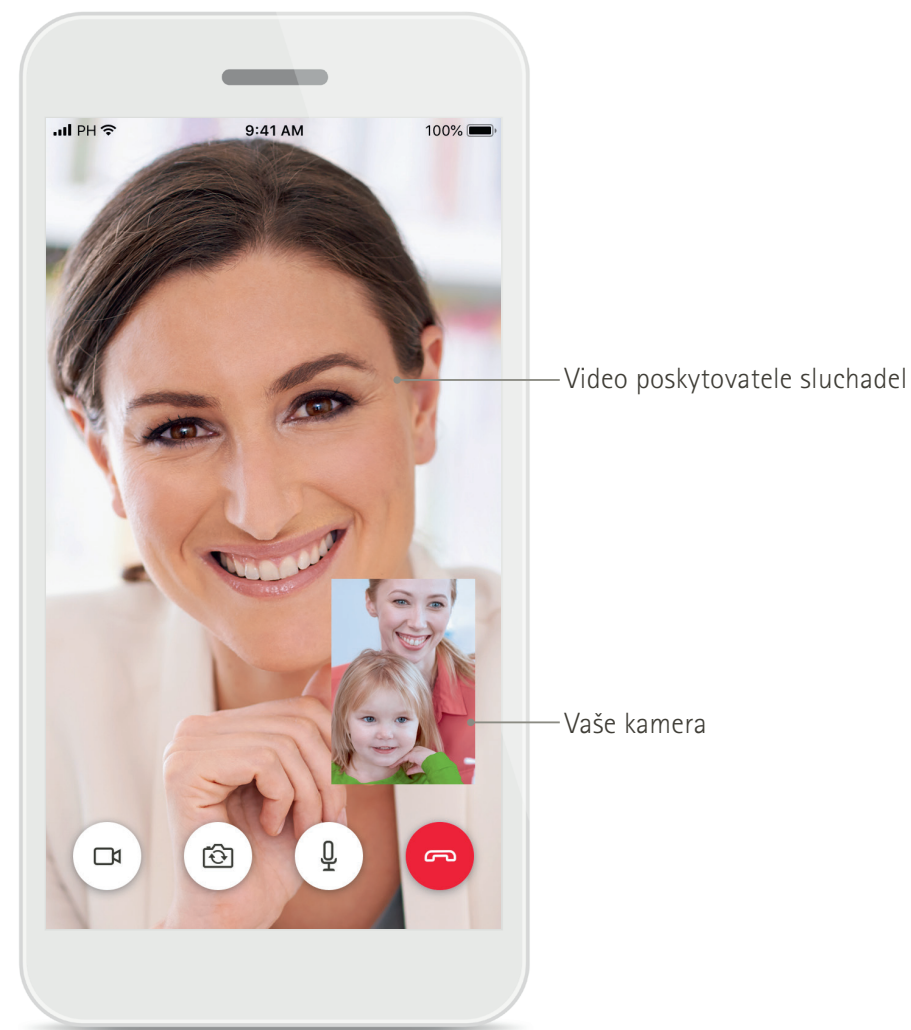


Hovor přes Vzdálenou podporu

*K dispozici pouze v některých zemích a u vybraných poskytovatelů sluchadel.

Instalace aplikace myPhonak Junior

- Připojte Váš chytrý telefon k internetu prostřednictvím Wi-Fi nebo mobilních dat.
- Na svém chytrém telefonu zapněte Bluetooth.

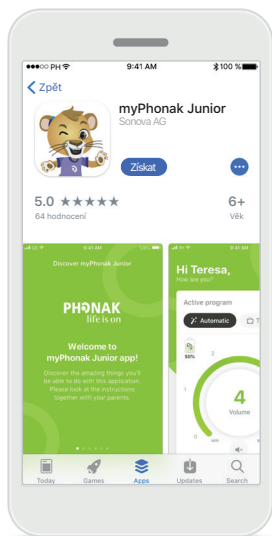


Stahování aplikace myPhonak Junior
Stáhněte si aplikaci z internetového obchodu. Po dokončení instalace si aplikaci myPhonak Junior otevřete.




Otevření aplikace myPhonak Junior
Otevřete aplikaci a klikněte na možnost **Prozkoumat**.



Prohlášení o ochraně osobních údajů
Aby bylo možné používat aplikaci, musíte kliknout na možnost **Souhlasím** a přijmout tak podmínky Prohlášení o ochraně osobních údajů pro pokračování.

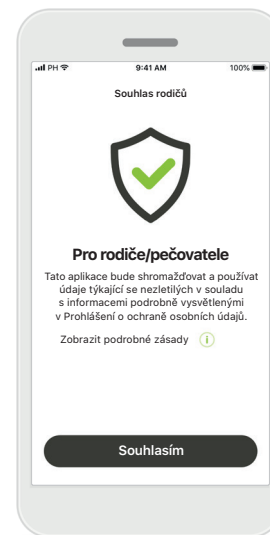


Souhlas rodičů
Jako rodič nebo pečovatel musíte souhlas rodičů přijmout, abyste mohli aplikaci používat. Aplikace myPhonak Junior shromažďuje a používá údaje týkající se nezletilých osob v souladu s informacemi uvedenými v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

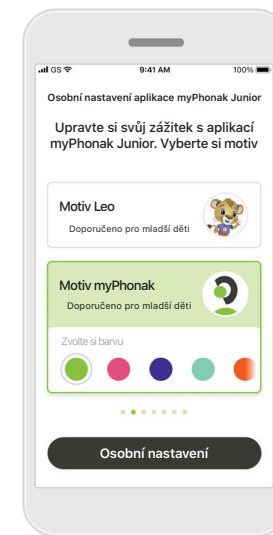

Zvolte motiv
Rodiče, pečovatelé nebo uživatelé aplikace si mohou vybrat motiv aplikace 'Leo' nebo 'myPhonak'. V obou motivech nabízí aplikace stejné funkce. Motiv si můžete zvolit v počátečním nastavení nebo v sekci Můj profil.


Párování s kompatibilními sluchadly*

Chcete-li propojit sluchadla s povolenou funkcí Bluetooth s aplikací myPhonak Junior, postupujte podle níže uvedených pokynů.**

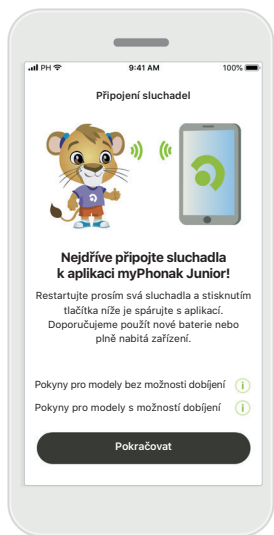


Pokyny k párování

Klepněte na možnost **Pokračovat** a postupujte podle pokynů pro Vaše sluchadla.

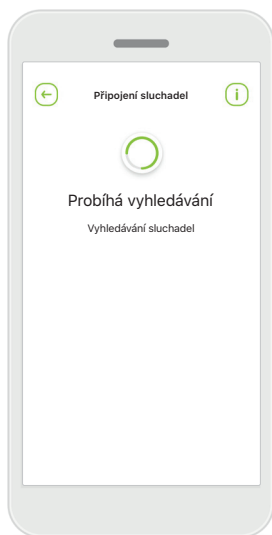


Probíhá vyhledávání

Aplikace vyhledává kompatibilní sluchadla a zobrazí je ihned po jejich detekci. Toto může trvat několik minut.

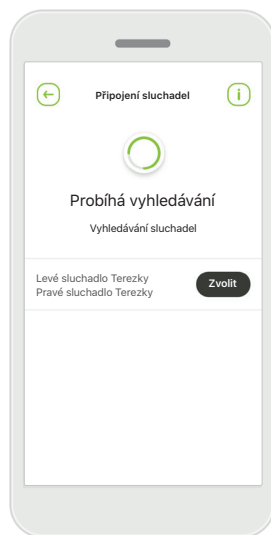


Výběr

Klepněte na možnost **Zvolit**, když se sluchadla zobrazí v seznamu.

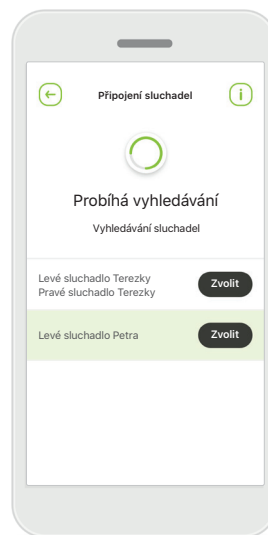

Více zařízení

Pokud je detekováno více sluchadel, budou se v souladu s tím zobrazovat. Pro zvýraznění Vašich sluchadel stiskněte tlačítko na svých sluchadlech.

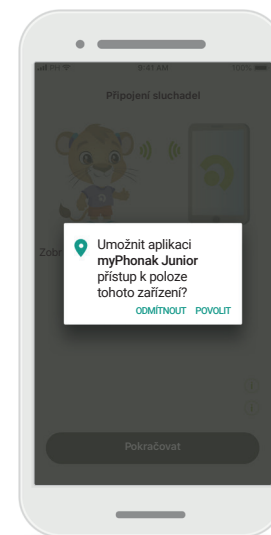

Poloha


U zařízení s OS Android musíte při prvním párování zařízení s funkcí Bluetooth povolit Služby určování polohy. Po úvodním nastavení lze Služby určování polohy znovu zakázat.

*Kompatibilní s modely Sky M, Sky Link M, Naida M, Bolero M, Audéo M, Naida P a Audéo P.

**Bluetooth streamování: Chcete-li do svých sluchadel streamovat hudbu nebo přijímat telefonní hovory, přejděte prosím do Settings (Nastavení) > Bluetooth a přidejte sluchadla do svého seznamu připojených zařízení. Poté se vraťte do aplikace a pokračujte v párování.

Párování s kompatibilními sluchadly*

Chcete-li propojit sluchadla s povolenou funkcí Bluetooth s aplikací myPhonak Junior, postupujte podle uvedených pokynů.

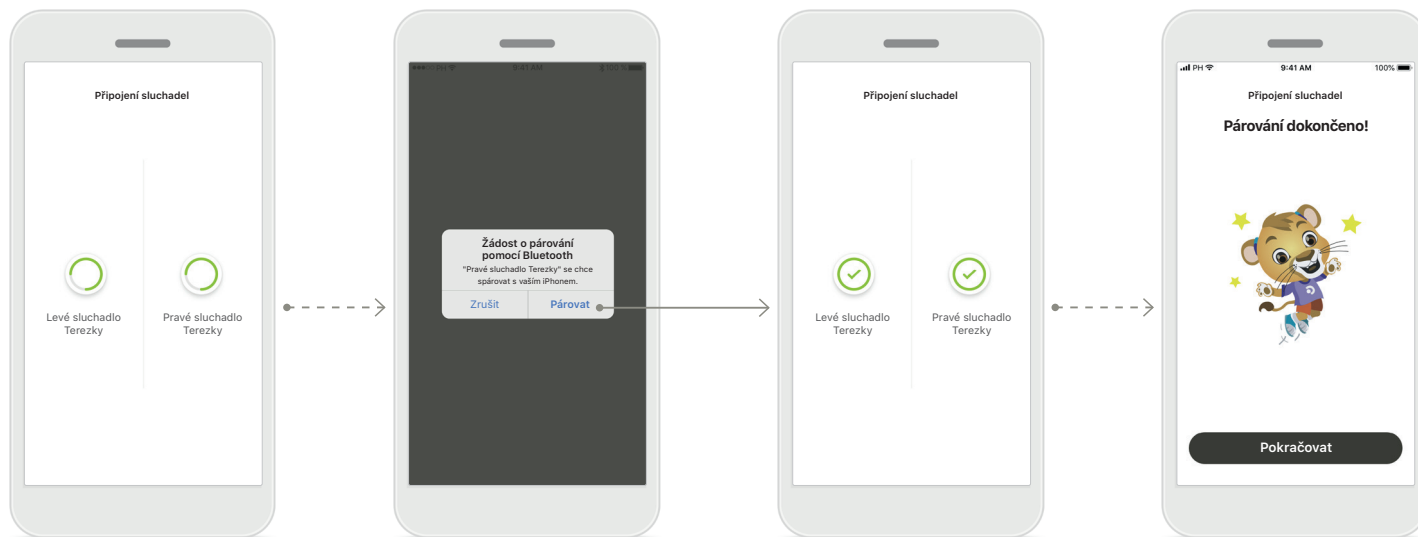

Párování sluchadel

Aplikace se připojí ke každému ze sluchadel samostatně.

Potvrzení pro všechna sluchadla

Až budete požádáni, potvrďte spárování kliknutím na tlačítko **Párovat** ve vyskakovacím okně pro každé zařízení zvlášť.

Párování dokončeno

Obě sluchadla jsou nyní spárována. Aplikace přejde automaticky k dalšímu kroku.


Nastavení dokončeno

Nyní jste připraven/a používat všechny kompatibilní funkce aplikace. Klepnutím na **Pokračovat** přejdete na hlavní obrazovku.

*Kompatibilní s modely Sky M, Sky Link M, Naída M, Bolero M, Audéo M, Naída P, Audéo P, Sky L, Naída L a Audéo L.

Rodičovská kontrola

Chcete-li aktivovat rodičovskou kontrolu v aplikaci myPhonak Junior, postupujte podle uvedených pokynů.

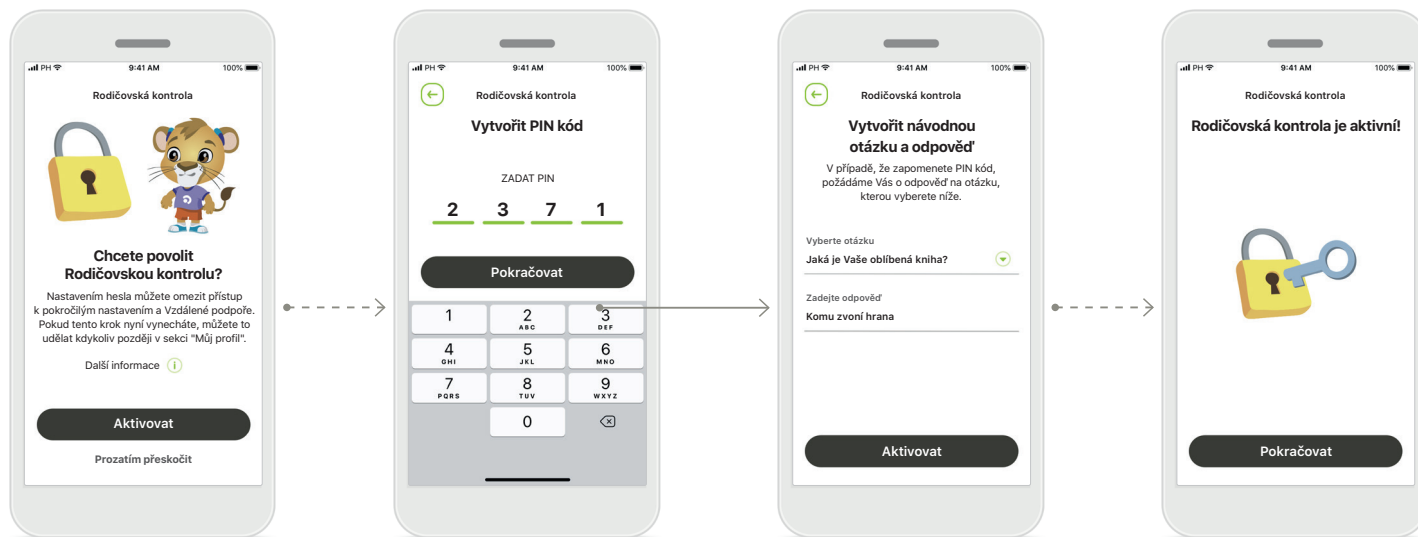

Povolení rodičovské kontroly

Rodičovská kontrola může být aktivována buďto během úvodního nastavení/zapnutí aplikace, nebo později dle potřeby rodiče/pečovatele v sekci Můj profil. Tato funkce pomáhá omezit přístup ke Vzdálené podpoře, funkci Automatické zapnutí dobíjecích sluchadel a výběru pásma Bluetooth pro telefonní hovory.

Vytvořit PIN kód

Definovat 4 číslice PIN kódu pro aktivaci rodičovské kontroly. Tento PIN kód lze kdykoliv změnit nebo restovat podle uvážení rodiče/osoby pečující o dítě.

Návodná otázka

Zvolte si návodnou otázku a napište správnou odpověď na ni. Tato otázka se bude používat pro přístup k omezeným funkcím, pokud zapomenete svůj 4místný PIN kód.

Rodičovská kontrola je aktivní

Po výběru návodné otázky a vepsání odpovědi můžete rodičovskou kontrolu aktivovat. Rodičovskou kontrolu lze také deaktivovat v nabídce aplikace, pokud již není potřeba.


Osobní nastavení

Abyste mohli využívat možnosti osobního nastavení, řiďte se pokyny níže.




Zahájit osobní nastavení

S osobním nastavením můžete začít buďto během úvodního nastavení nebo později v sekci Váš profil na domovské obrazovce.

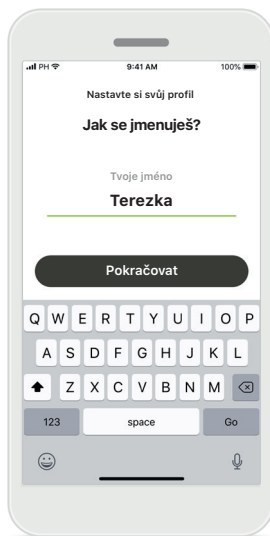


Uživatelské jméno

Zvolit uživatelské jméno.

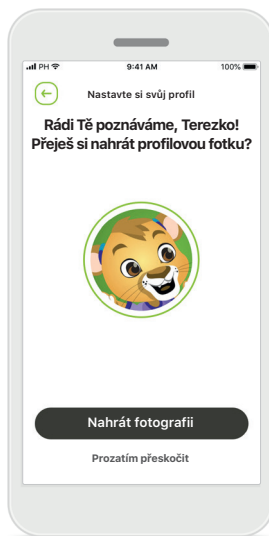

Profilová fotka uživatele

Zvolte profilovou fotografii. Tuto část můžete přeskočit a nastavit později v sekci Můj profil.

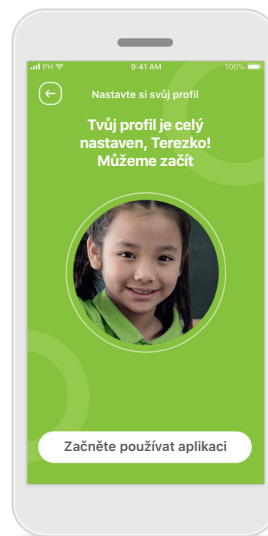


Další možnosti

K možnostem osobního nastavení patří změna barvy motivu na pozadí aplikace a změna barvy virtuálních sluchadel a háků.

Řešení problémů s párováním

Možné chyby během postupu nastavení.


Více informací ohledně řešení potíží navštivte webovou stránku podpory značky Phonak.

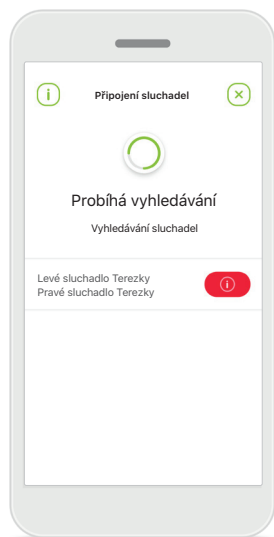

Nekompatibilní zařízení

Aplikace se nemůže připojit k zařízením, protože nejsou kompatibilní.


Další informace získáte u poskytovatele sluchadel.

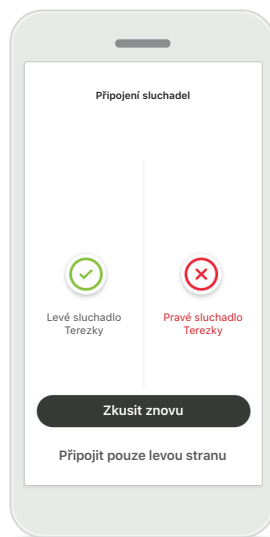

Chyba připojení sluchadla

Pokud párování s jedním ze sluchadel selže, můžete:

1. Klepnutím na možnost **Zkusit znovu** proces párování znovu spustit.
2. Pokračovat jen s jedním z obou sluchadel.

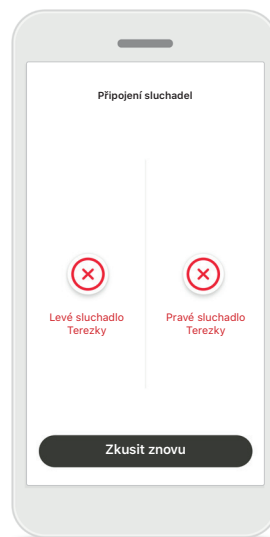


Připojení selhalo u obou sluchadel

Klepněte na možnost **Zkusit znovu**, proces párování spustíte znovu a dále postupujte podle pokynů.

Hlavní náhled dálkového ovládní

Funkce dostupné pro všechna sluchadla.

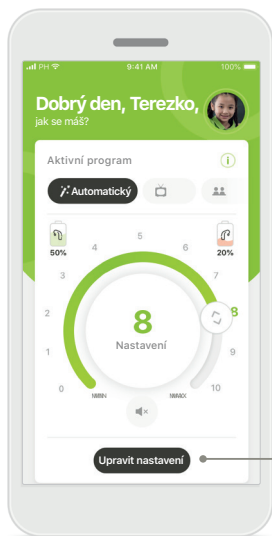


Nastavení hlasitosti sluchadla

Pohybem posuvníku můžete změnit hlasitost.

Změna aktivního programu


Klepněte na dostupné programy a upravte nastavení podle aktuálního poslechového prostředí. Dostupné programy jsou závislé na nastavení sluchadel Vaším poskytovatelem sluchadel.

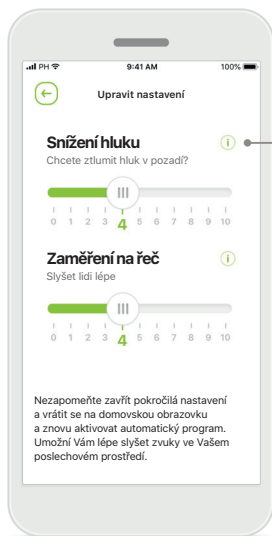

Upravit nastavení


Tato nastavení Vám poskytují přístup k následujícím funkcím:

- Snížení hluku
- Zaměření na řeč

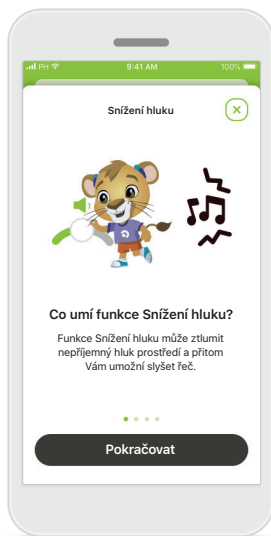


Informace

K dalším informacím o různých funkcích získáte přístup stisknutím ikony **i**.

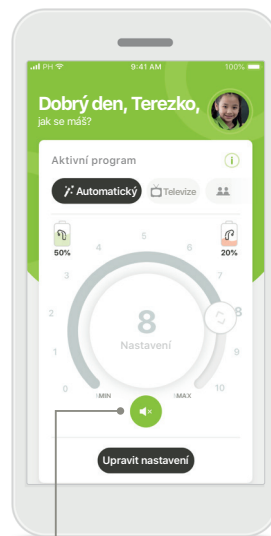

Ztlumit

Sluchadlo/a můžete ztlumit stisknutím ikony **Režim vypnutí zvuku**.

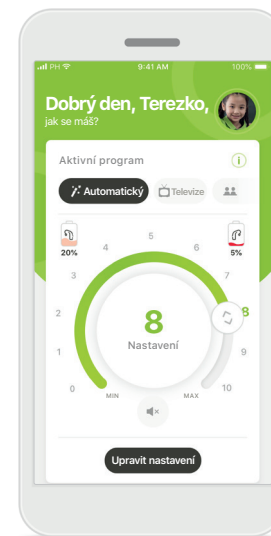


Nízká úroveň nabití baterie

Pokud nabití baterie klesne pod 20 %, ikona se zbarví do červena. Nezapomeňte svoje sluchadla včas nabít.

Relace Vzdálené podpory


Pokud používáte mobilní data, může Vám je Váš mobilní operátor účtovat. Tuto skutečnost prověřte u svého poskytovatele telefonních služeb, než zahájíte relaci se Vzdálenou podporou Phonak.

Relace Vzdálené podpory využije zhruba 56 MB za 10 minut videohovoru, audiohovor využívá asi 30 MB.

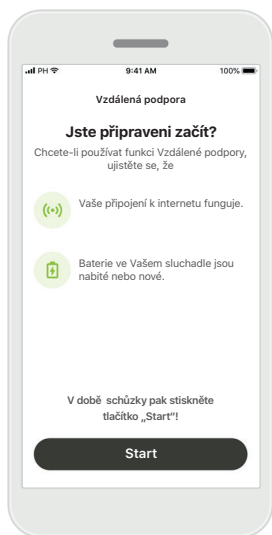


Zahájení relace Vzdálené podpory

Při zahájení Vaší schůzky, otevřete aplikaci myPhonak Junior a klikněte na **Start**, čímž dáte svému poskytovateli sluchadel vědět, že jste připraveni na relaci Vzdálené podpory Phonak.

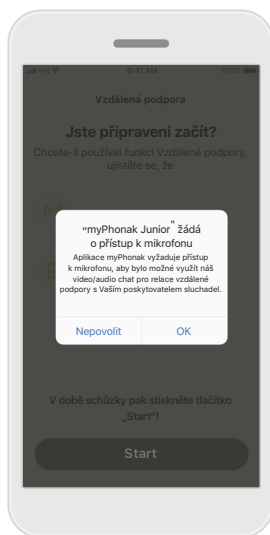


Přístup ke kameře a mikrofonu

Kliknutím na **OK** povolíte aplikaci myPhonak Junior přístupu ke své kameře a mikrofonu.

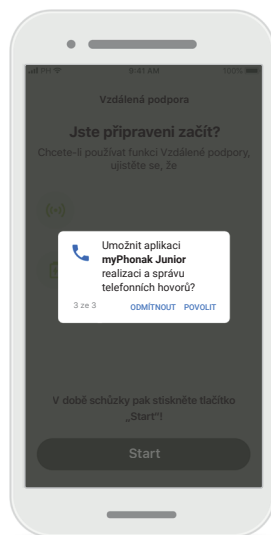

Přístup k hovorům přes myPhonak

Máte-li chytrý telefon se systémem Android, klepnutím na možnost **POVOLIT** povolte provádění a správu telefonických hovorů v aplikaci myPhonak Junior.

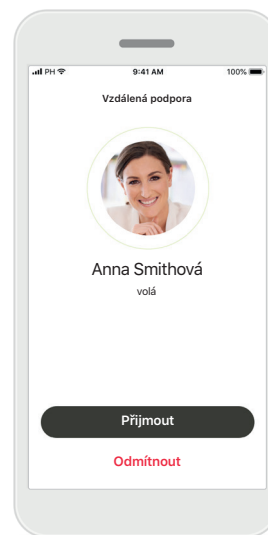


Přijímání videohovorů

Aplikace vás spojí s poskytovatelem sluchadel. Klepnutím na možnost **Přijmout** akceptujete hovor od poskytovatele sluchadel.


Relace Vzdálené podpory

Pokud chcete, můžete během relace Vzdálené podpory personalizovat svou zkušenost spuštěním či ukončením videa nebo audia.

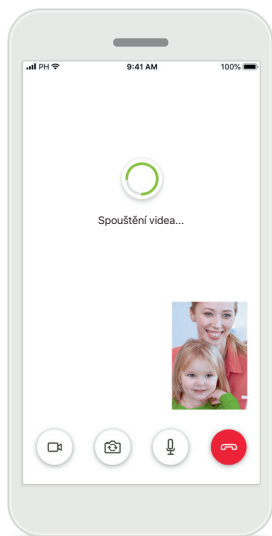


Zahájení videohovoru

Po několika sekundách se objeví obraz a můžete vidět svého poskytovatele sluchadel.

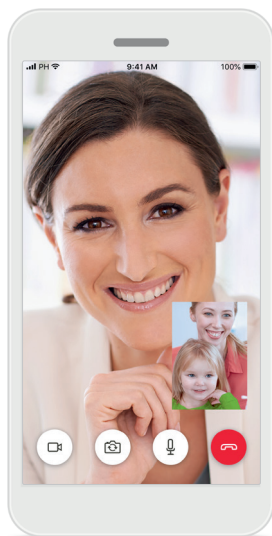


Probíhající hovor

Nyní jste připojen/a ke svému poskytovateli sluchadel.

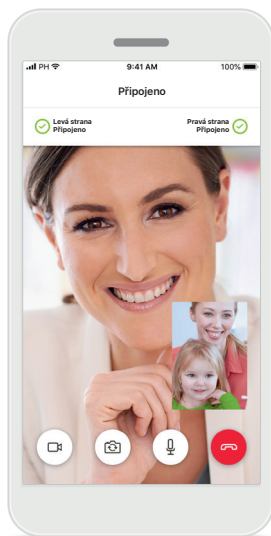


Připojená sluchadla

Pokud se poskytovatel sluchadel potřebuje připojit k Vaším sluchadlům, lze to provést vzdáleně pomocí Vašeho chytrého telefonu. Váš poskytovatel sluchadel Vás uvědomí, že se připojuje k Vaším sluchadlům.

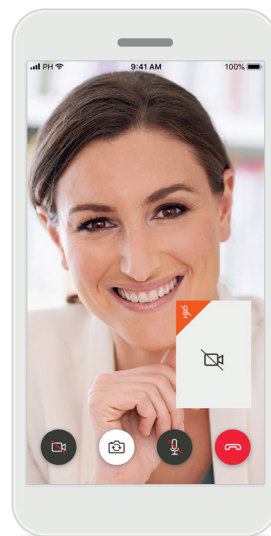

Žádné video

Pokud si přejete video skrýt, můžete jej zakázat kliknutím na tlačítko.


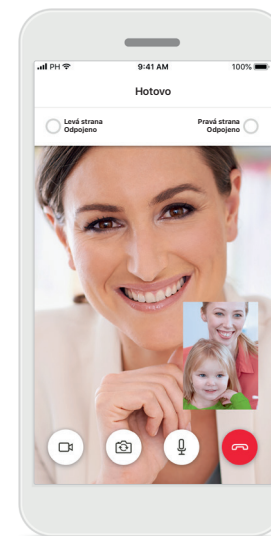


Uložení nových nastavení


Vaše sluchadla se rychle ztlumí během procesu připojování a při ukládání nastavení do sluchadel. Budete moci sledovat stav na obrazovce.

Moje sluchadla


Funkce závislé na naprogramování sluchadel a na tom, jaké bezdrátové příslušenství máte.

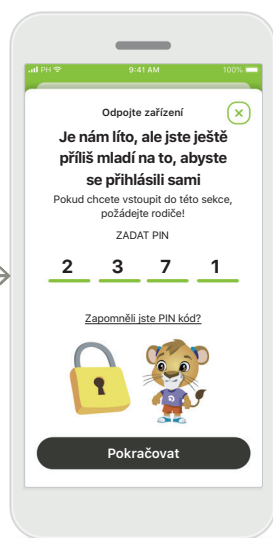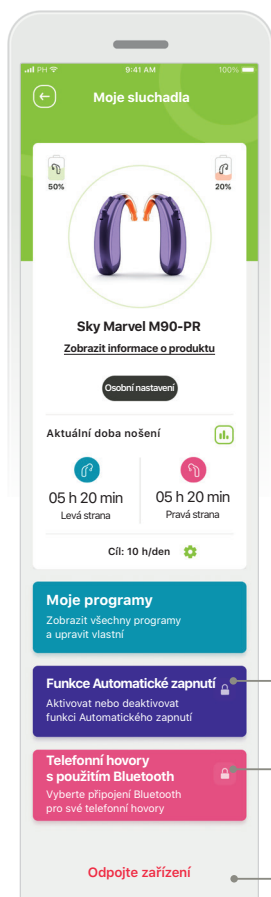


Rodičovský zámek
Rodičovská kontrola může chránit malé děti před nechtěným odpojením svého sluchadla.

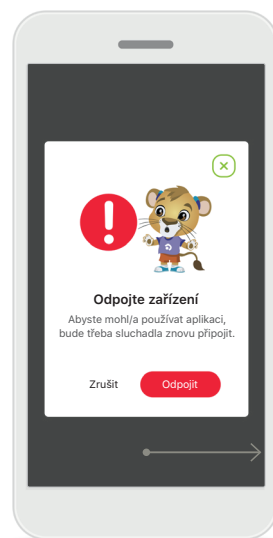

Odpojte zařízení
Své sluchadlo můžete odpojit stiskem tlačítka **Odpojit**.
Vezměte na vědomí, že pokud tak učiníte, budete muset sluchadla znovu spárovat, aby bylo možné použít aplikaci.

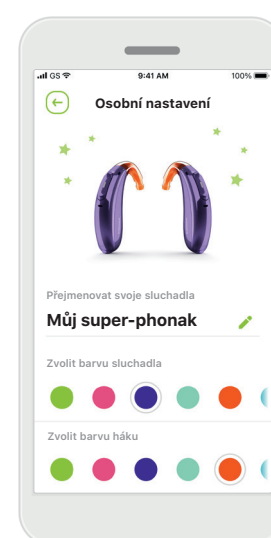

Osobní nastavení*
Barvu sluchadla, háku a název zařízení zobrazované v aplikaci můžete změnit.

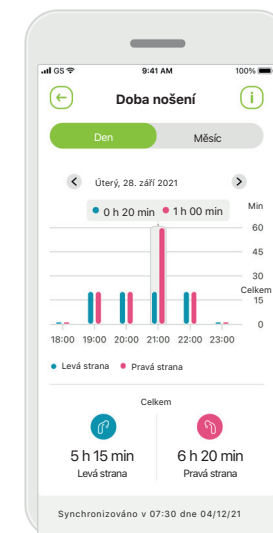

Doba nošení*
Údaj o době nošení poskytuje přehled o tom, jak dlouho bylo které sluchadlo používáno v rámci dne nebo měsíce, a o typu prostředí, v němž Vaše dítě poslouchá. Nejvíce informací poskytnou sluchadla s dobýjecími bateriemi.

Moje sluchadla

Obrazovka 'Moje sluchadla' poskytuje cenné informace ohledně stavu baterie (u dobýjecích zařízení), typu Vašich sluchadel, instalaci licenci Roger, době nošení, Vašich programech, funkci automatického zapnutí a telefonických hovorech s použitím Bluetooth. Také zde můžete upravovat vzhled Vašich sluchadel.

*Dostupné pouze pro konkrétní sluchadla.

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím aplikace si prosím přečtěte relevantní bezpečnostní informace na následujících stranách.

Určený účel použití:

Aplikace je samostatný software určený pro uživatele sluchadel a slouží k výběru, konfiguraci a ukládání nastavení sluchadel, a to v omezeném rozsahu, který umožňuje nastavovací software. Aplikace také určeným uživatelům sluchadel umožňuje a pomáhá spojit se a komunikovat s poskytovateli sluchadel za účelem vzdáleného nastavení sluchadel.

Určená populace pacientů:

Toto zařízení je určeno pro pacienty s jednostrannou a oboustrannou, mírnou až hlubokou ztrátou sluchu od 6 let.

Určený uživatel:

Osoba se ztrátou sluchu používající kompatibilní zařízení a osoba, která o ni pečuje.

Uživatelská příručka pro všechny verze aplikace v příslušných jazycích v digitální podobě je k dispozici na internetových stránkách. Přístup k uživatelským příručkám získáte takto:

- Klikněte na adresu <https://www.phonak.com/en-int/support> a zvolte si zemi, která Vás zajímá.
- Přejděte na stránku „Support“ (v angličtině) nebo její ekvivalent v příslušném jazyce.
- Přejděte na stránku „User Guides“ (v angličtině) nebo její ekvivalent v příslušném jazyce.
- Přejděte na stránku „Apps“ (v angličtině) nebo její ekvivalent v příslušném jazyce.
- Vyberte možnost "myPhonak Junior app"(v angličtině).

Aktuální verze uživatelské příručky k aplikaci myPhonak Junior je také dostupná přímo v aplikaci, když po přechodu do sekce Podpora klepnete na kartu s názvem „Uživatelská příručka“. Uživatelská příručka se pak otevře v novém okně prohlížeče.

Bezpečnostní upozornění

Údaje o pacientech představují osobní údaje a jejich ochrana je důležitá:

- Ujistěte se, že jsou v chytrých telefonech nejnovější bezpečnostní aktualizace operačního systému. Povolit automatické aktualizace.
- Ujistěte se, že vaše instalovaná verze aplikace je aktuální.
- Používejte pro svá sluchadla pouze původní aplikace společnosti Sonova z oficiálních obchodů.
- Instalujte pouze důvěryhodné aplikace z oficiálních obchodů
- Ujistěte se, že používáte silná hesla a uchovávejte přihlašovací údaje v tajnosti.
- Telefon zamykejte kódem PIN a/nebo pomocí biometrie (např. otisku prstu, snímku obličeje) a nastavte telefon na automatické uzamknutí po několika minutách nečinnosti.
- Ujistěte se, že nainstalované aplikace mají jen taková oprávnění, která jsou nutná.
- Neprovádějte párování Bluetooth se svými sluchadly na veřejných prostranstvích. Je to kvůli riziku nežádoucího rušení ze strany cizích osob. Doporučujeme provádět párování Bluetooth doma.
- NEPOUŽÍVEJTE telefon přepnutý do privilegovaného režimu (jailbroken/rooted).

Zajistěte, aby byla data vždy zabezpečena. Mějte prosím na paměti, že tento výčet bezpečnostních opatření není úplný.

- Při přenosu dat prostřednictvím nezabezpečených kanálů buď odesílejte anonymní údaje, nebo je zašifrujte.
- Chraňte zálohy dat svého chytrého telefonu nejen před ztrátou dat, ale také před krádeží.
- Odstraňte všechna data z chytrého telefonu, který již nepoužíváte nebo který bude zlikvidován.

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím aplikace si prosím přečtěte relevantní bezpečnostní informace na následujících stranách.

Údržba softwaru:

Neustále sledujeme zpětnou vazbu od našich zákazníků. Budete-li mít s nejnovější verzí aplikace jakékoli potíže, obraťte se prosím na místního zástupce výrobce a/nebo poskytněte zpětnou vazbu v obchodu AppStore nebo Google Play Store.

Indikace

Vezměte prosím na vědomí, že indikace nejsou odvozeny z mobilní aplikace, ale z kompatibilních sluchadel. Obecné klinické indikace pro použití sluchadel a softwarové funkce Ekvalizace tinitu jsou:

- Přítomnost ztráty sluchu
 - Jednostranná nebo oboustranná
 - Převodní, percepční nebo smíšená
 - Mírná až těžká
- Existence chronického tinitu (pouze pro sluchadla s funkcí Ekvalizace tinitu)

Kontraindikace

Vezměte prosím na vědomí, že indikace nejsou odvozeny z mobilní aplikace, ale z kompatibilních sluchadel. Obecné klinické kontraindikace pro použití sluchadel a softwarové funkce Ekvalizace tinitu jsou:

- Ztráta sluchu není tímto sluchadlem řešitelná (zesílení, frekvenční odezva)
- Akutní tinitus.
- Deformita ucha (např. uzavřený zvukovod, chybějící ušní boltec)
- Nervová ztráta sluchu (retrochleární patologie, např. chybějící nebo nefunkční sluchový nerv)

Primární kritéria pro odeslání pacienta k vyšetření či léčbě u lékaře nebo jiného specialisty jsou tato:

- Viditelná vrozená nebo úrazová deformita ucha Anamnéza aktivního výtoku z ucha v posledních 90 dnech
- Náhlá nebo rychle progredující ztráta sluchu v jednom nebo obou uších během předchozích 90 dnů.
- Akutní nebo chronické závratě
- Audiometrický rozdíl vedení vzduch-kost je roven nebo větší než 15 dB při frekvenci 500 Hz, 1 000 Hz a 2 000 Hz
- Viditelné nahromadění významného množství ušního mazu nebo cizí těleso ve zvukovodu
- Bolest nebo nepříjemné pocity v uchu

- Abnormální vzhled bubínku a zvukovodu jako například:
 - Zánět vnějšího zvukovodu
 - Perforovaný ušní bubínek
 - Další abnormality, které jsou podle poskytovatele sluchadel lékařsky závažné

Lékař může rozhodnout, že doporučení pacienta není na místě nebo není v nejlepším zájmu pacienta, pokud se na pacienta bude vztahovat něco z následujícího:

- Existuje dostatečný důkaz, že stav pacienta byl plně vyšetřen odborným lékařem a byla poskytnuta veškerá možná léčba.
- Stav se od posledního vyšetření anebo léčby nezhoršil ani se nijak výrazně nezměnil.
- Pokud pacient vyjádřil informované a kompetentní rozhodnutí nepřijmout radu a nevyhledat lékařské posouzení, je přípustné doporučit vhodné sluchadlo na základě těchto úvah:
 - Doporučení nebude mít negativní vliv na zdraví a obecnou pohodu pacienta.
 - Záznamy dokládají, že všechny nezbytné úvahy o tom, co je v nejlepším zájmu pacienta, byly učiněny. Pokud to vyžadují zákonné předpisy, pacient podepsal prohlášení potvrzující, že nesouhlasí s odesláním k jinému specialistovi a že se jedná o informované rozhodnutí.

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím aplikace si prosím přečtěte relevantní bezpečnostní informace na následujících stranách.

Omezení použití

Používání aplikace je omezeno možnostmi kompatibilního/kompatibilních zařízení.

Vedlejší účinky

Vezměte prosím na vědomí, že vedlejší účinky nejsou odvozeny z mobilní aplikace, ale z kompatibilních sluchadel. Fyziologické vedlejší účinky sluchadel, jako je tinitus, závratě, hromadění ušního mazu, příliš velký tlak, pocení nebo vlhkost, puchýře, svědění a/nebo vyrážky, pocit ucpaného či plného zvukovodu, a jejich následky, jako je bolest hlavy a/nebo bolest ucha, může vyřešit či zmírnit poskytovatel sluchadel. Konvenční sluchadla mohou pacienty vystavit působení vyšších hladin zvuku, což může vést k posunutí prahových hodnot frekvenčního rozsahu dotčeného akustickým traumatem.

Klinický přínos

Klinický přínos nevyplývá z aplikace, ale z kompatibilních sluchadel. Aplikace pomáhá předpokládaným uživatelům tím, že jim poskytuje možnost úprav v rámci rozsahu, stanoveného při počátečním nastavení.

Aplikace určeným uživatelům poskytuje pohodlný způsob komunikace a spojení s poskytovateli sluchadel za účelem vzdáleného nastavení sluchadel.

Jakákoli závažná událost, která se vyskytla v souvislosti s aplikací, by měla být nahlášena zástupci výrobce a příslušnému orgánu ve státě bydliště. Závažná událost je popsána jako jakákoli událost, která přímo nebo nepřímo vedla, mohla vést anebo může vést k některé z následujících situací:

- a) smrti pacienta, uživatele anebo jiné osoby,
- b) dočasnému nebo trvalému závažnému zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele anebo jiné osoby,
- c) vážnému ohrožení veřejného zdraví.

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím aplikace si prosím přečtěte relevantní bezpečnostní informace na následujících stranách.



Snížením zesílení nebo zvýšením intenzity „rušičky“ hluku můžete rovněž snížit slyšitelnost varování a bezpečnostních signálů. Mohlo by dojít k rizikovým situacím.



Pokud sluchadla nereagují, zkontrolujte, zda nejste mimo jejich dosah, zda jsou zapnutá, zda není vybitá baterie nebo zda nejsou přítomna rušivá pole, pokud ano, vzdalte se z jejich dosahu.



Aktivujte svůj Bluetooth. Aby bylo možné sluchadla připojit, je třeba Bluetooth povolit.



Za používání vlastního chytrého telefonu nesete osobní odpovědnost. S chytrým telefonem a aplikací nakládejte obezřetně.

Vysvětlivky k použitým symbolům



Tento symbol označuje, že je důležité, aby si uživatel přečetl a zohlednil příslušné informace uvedené v této uživatelské příručce.



Tento symbol znamená, že je důležité, aby se uživatel řídil relevantními upozorněními uvedenými v této uživatelské příručce.



Důležité informace týkající se manipulace s výrobkem a jeho bezpečnosti.




Symbolem CE společnost Sonova AG potvrzuje, že tento výrobek Phonak splňuje požadavky směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS. Certifikace CE udělena v roce 2021. Čísla za symbolem CE jsou kódy certifikovaných institucí konzultovaných na základě výše uvedených směrnic.



Označuje zplnomocněného zástupce v Evropském společenství. Zástupce pro ES je také dovozce do Evropské unie.



Označuje, že zařízení je zdravotnickým prostředkem.

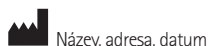

Kombinovaný symbol „výrobce zdravotnického prostředku“ a „datum výroby“, jak je uvedeno v nařízení (EU) 2017/745.



Označení, že je k dispozici elektronický návod k použití. Návod je k dispozici na stránkách phonak.com/junior/userguide



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Švýcarsko



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen · Německo

Distributor pro Českou republiku:

REJA spol. s r. o.
www.reja.cz
www.phonak.cz
www.sluchadla-deti.cz
www.komunikacnisystem.cz
www.audiodum.cz

Chcete-li získat tištěnou kopii s návodem k použití, kontaktujte místního zástupce společnosti Sonova. Kopie Vám bude zaslána do 7 dnů.

V4.00/2023-11/NLG © 2021-2024 Sonova AG Všechna práva vyhrazena

Tato uživatelská příručka se týká aplikace myPhonak Junior 1.3 a pozdějších podverzí aplikace myPhonak Junior 1.

Předchozí verzi uživatelské příručky k aplikaci si vyžádejte od místního zástupce nebo navštivte internetové stránky.

